



Ambuláns vérnyomásmérő és Holter EKG készülékek





ABPM-05

**ambuláns
vérnyomásmérő készülék**


A tökéletes eszköz a pontos vérnyomásprofil feltérképezéséhez, valamint a fehérvérnyomás-szindróma kiküszöböléséhez. ABPM-05 készülékünk az egyik legkisebb és legkönnyebb vérnyomásmérő a piacon.

ABPM-06

A/A validációs ambuláns vérnyomásmérő készülék

Az ABPM-06 eszköz jócskán túlszárnyalja az alapokat: nemcsak pontos és megbízható, hanem egyben felhasználóbarát megoldásokat is kínál. Úgymint: beépített hangrögzítő, automatikus mandzsettaméret-detekció és SleepWell® technológia.



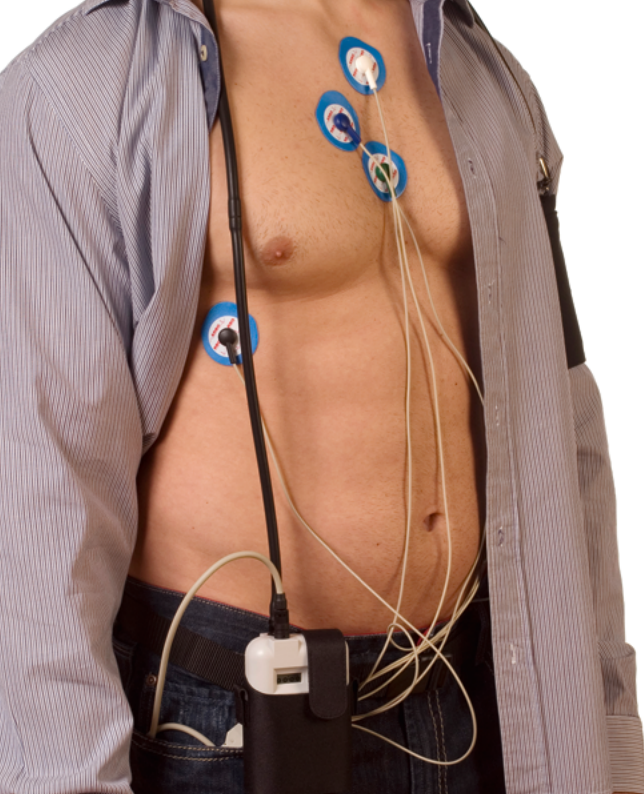

card(X)plore

**kombinált vérnyomásmérő
és Holter EKG**

Nézze a teljes képet!
Tekintve, hogy a hipertónia a
kardiovaszkuláris betegségek
egyik leggyakoribb rizikó-
faktora, különösen fontos és
hatékony lehet a vérnyomás
és EKG-adatok egyidejű
vizsgálata.

Tulajdonságok

	ABPM-06	ABPM-05	card(X)plore
méret	70 × 99 × 30 mm		124 × 82 × 33,5 mm
súly (elemek nélkül)	196g		250g
memória	belső		külső (kártyaolvasó szükséges az adatok kiolvasásához)
adatátvitel	mini USB kábel	USB optikai kábel	
tápellátás	2db AA méretű elem		4db AA méretű elem
működési idő	akár 51 óra		
mérési módszer	oszcillometrikus, lépcsőzetes leeresztéssel		
Tartomány: vérnyomás pulzus	30–280 mmHg	30–260 mmHg	
	40–240 ütés/perc	40–200 ütés/perc	
passzív pontosság	a mért érték ± 3 mmHg v. 2% (stabilitás: 2 év)		
maximális vérnyomás- adat-tárolás	több mint 600 mérés		minimum 400 mérés
LCD kijelző	LCD, 40 × 22 mm		LCD, 20× 8 mm
hangjegyzet	8 × 15 mp	–	
EKG Holter analízis	–		3 csatorna (7 elvezetés)
aktigráf	–		2 tengelyes poliszilikon gyorsulásérzékelő
minőségtanúsítványok	CE, FDA		CE
validációk	ESH IP 2010 protokoll; BHS protokoll (A/A); ANSI/ AAMI/ISO 81060-2-2013 standard	BHS protokoll (B/B); AAMI pontossági kritérium	

EasyABPM és CardioVisions

Ingyenesen elérhető szoftverek házi orvosok és kutatók számára egyaránt

	ABPM-06	ABPM-05	card(X)plore
szoftver	EasyABPM, CardioVisions		CardioVisions
ABPM-analízis	4 beállítható mintavételezési periódus, szisztolés és diasztolés vérnyomásadatok, MAP (artériás középnyomás), pulzus, min.-max. értékek, pulzusnyomás, szórás, PE, vérnyomásterhelés, napi ingadozás, reggeli emelkedés, statisztikák, hisztogramok, korrelációk		
Holter EKG-analízis	-		automatikus ütésanalízis, szívritmuszavar, HRV, PQ QT, ST és pacemakerelemzés, eseménymegoszlás
aktigráf	-		✓
személyre szabható, nyomtatható riportok	✓		




CardiUP!12

3/12 csatornás Holter EKG

Egyetlen ütésről se maradjon le!

A készülék az átfogó kardiovaszkuláris feltérképezés jegyében klasszikus 12 csatornás nyugalmi EKG-rendszerként ugyanúgy megállja a helyét, mint 3 csatornás Holterként.

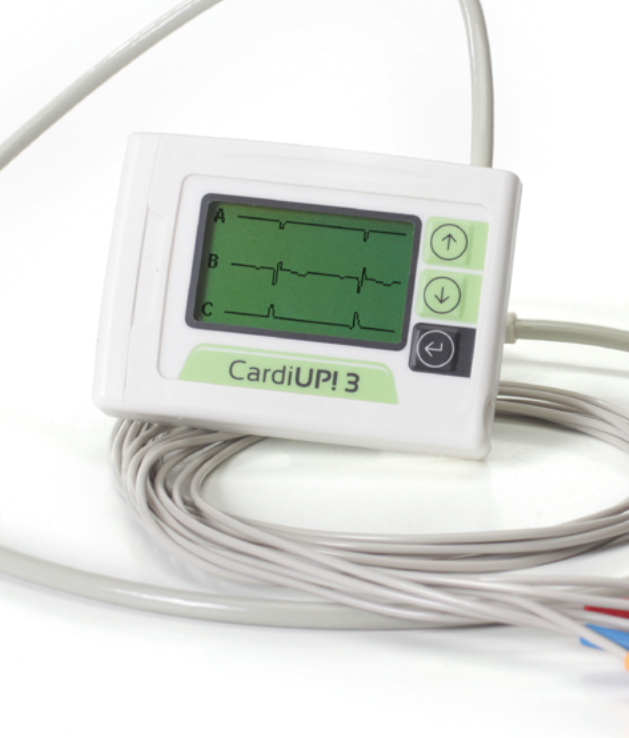

CardiUP!3

3 csatornás Holter EKG

A könnyen kezelhető menüstruktúrának, valamint az erőteljes szoftver EKG-elemző megoldásainak köszönhetően a CardiUP! termékcsalád praktikus és gyors megoldásokat kínál.

Tulajdonságok

	CardiUP!12	CardiUP!3
méret	67 × 93 × 21 mm	
súly (elem nélkül)	92g	
memória	belső	
adatátvitel	USB 2.0 (mini USB)	
tápellátás	1 db AA méretű elem	
kijelző	LCD, 48 × 28 mm	
nyomógombok	4 (esemény, fel, le, kiválasztás)	
csatornaszám	3/12 független csatorna (7 vagy 10 elvezetés)	3 független csatorna (7 elvezetés)
tárolási kapacitás	akár 168 óra folyamatos felvételezés	
mintavételezés, A/D felbontás	300, 600 vagy 1200 Hz, 12 bit	
tárolási frekvencia	300, 600 vagy 1200 Hz	
minőségtanúsítványok	CE	

A Meditech nem vállal felelősséget a brosrában található információk teljességéért, átfogó, pontos vagy naprakész voltaért, illetve nem tekinthető az hivatalos ajánlatnak. A termék szakszerű felhasználásával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a vonatkozó használati útmutatót.

A szoftverben...

	CardiUP!2	CardiUP!3
QRS-elemző analízis pontossága	99,90% (AHA és MIT adatbázisok szerint tesztelve)	
ütésről ütésre történő EKG-analízis	✓	
eseménymegoszlás	✓	
ST-analízis	✓	
QT-analízis	✓	
PQ-analízis	✓	
PM-analízis	✓	
időtartomány szerinti HRV-analízis	✓	
frekvenciatartomány szerinti HRV-analízis	✓	
aritmiaanalízis	✓	
adatok grafikus és táblázatos megjelenítése	✓	
személyre szabott megjelenítés	✓	
beállítható és nyomtatható riportok	✓	
egyéni és hálózatos használat	✓	

Rólunk

A Meditech Kft. ambuláns vérnyomásmérő és Holter EKG készülékek, valamint ezeket támogató, a kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktorainak feltárását segítő erőteljes szoftvermegoldások fejlesztésével foglalkozik 1990 óta.

Vevőink között megtalálhatók viszonteladók éppúgy mint kutatók és egészségügyi dolgozók, valamint gyógyszergyártó cégek.

Szívünk a legjobb Holtert érdemli!



Magyarországi forgalmazó: ABPM-Art Kft., 1196 Budapest, Hunyadi u. 153.
telefon: +36 1 282 9934 • email: abpmart@abpmart.hu
www.abpmart.hu



Meditech Kft. • 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 24.