

CardiUP!2 & CardiUP!3

CardioMera

CardioBlue



EKG monitorok

Meditech

Kardiovaszkuláris monitorozás

A Meditech a világ vezető ambuláns vérnyomásmérő monitor és EKG készülék gyártóinak egyike.

Az 1990-ben magyar vállalkozók által alapított Meditech Kft. a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek monitorozására alkalmas orvosi műszereket gyárt és szoftvereket fejleszt.



CardiUP!12 Holter EKG

CardiUP!12 Holter EKG a klasszikus 12 elvezetésű rendszert használja a teljesebb kardiovaszkuláris kockázati tényezők feltárása érdekében.

CardiUP!3 3-csatornás változat szintén elérhető!

Cardiup!12 és CardiUP!3 előnyök

- akár 7 napos használat a jobb kardiovaszkuláris analízis érdekében
- nagyméretű LCD kijelző
- 12 vagy 3 csatornás felvételezés
- valós időben történő EKG kijelzés az elektródák megfelelő felhelyezéséért
- eseménygomb
- könnyen kezelhető menüstruktúra
- minőségi PM ütésérzékelés
- mini USB csatlakozó
- kézi és szoftveres felprogramozás
- többfunkciós hordtáska
- ingyenes szoftver




CardioBlue

EKG eseményrekorder

Néhány szívritmuszavar rendszertelenül, csak bizonyos tevékenységek végzése közben jelentkeznek. A CardioBlue EKG eseményrekorder használata megnöveli a ritkán előforduló szívritmuszavarok okainak feltárási esélyét.

CardioBlue előnyök

- 1-, 2-, 3- vagy 5-csatronás felvételezés
- 2 az 1-ben funkció: működés looping (visszatekintő) és post-event (esemény utáni) módban egyaránt
- egyesével cserélhető pácienskábelek
- kis méret és súly
- start gomb manuális EKG felvételezéshez
- ingyenes szoftver

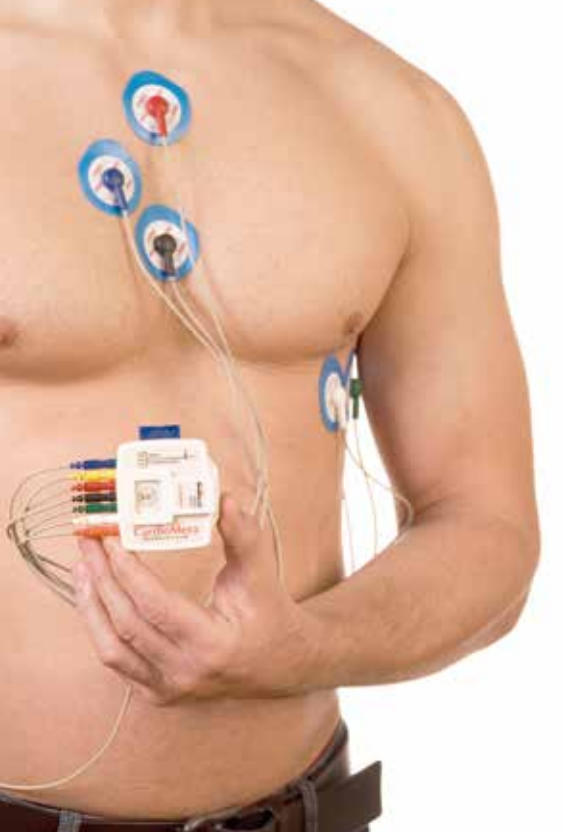

CardioMera Holter EKG

A CardioMera mini Holter EKG megnöveli a naponta előforduló szívpanaszok okainak feltárási esélyét.

CardioMera előnyök

- 1-, 2-, 3- vagy 5-csatornás felvételezés
- egyesével cserélhető pácienskábelek
- kis méret és súly
- eseménygomb
- ingyenes szoftver

Tulajdonságok	CardiUP!2 CardiUP!3	CardioMera	CardioBlue	
méret	67*93*21 mm	66*59*17 mm		
súly (elem nélkül)	92 g	50 g		
memória	belső	külső	belső	
adatátvitel	USB 2.0 (mini USB)	USB optikai kábel	vezetéknélküli Bluetooth	
tápellátás	1 AA elem	1 AAA elem		
LCD kijelző	48*28 mm	-		
nyomógombok	4 (esemény, fel, le, kiválasztás)	1 (esemény)	1 (start)	
csatornaszám	12 vagy 3 független csatorna (10 vagy 7 elvezetés)	1, 2, 3, 5 csatorna (7 elvezetés)		
működés	akár 168 óra folyamatos EKG rögzítés	akár 96 óra folyamatos EKG rögzítés	akár 168 óra (looping mód) akár 3 hónap (post-event mód)	beállításoktól függhően 8-136 perc EKG rögzítmény
mintavételezés, A/D felbontás	300, 600 vagy 1200 Hz, 12 bit	600 vagy 1200 Hz, 12 bit		
tárolás	300, 600 vagy 1200 Hz	150, 300 vagy 600 Hz		
minőségtanúsítványok	CE			

CardioVisions szoftver

Gyors és pontos elemzés

Tulajdonságok	CardiUP!12 CardiUP!3	CardioMera	CardioBlue
pontosság	99,90%		
ütésről ütésre történő EKG annotáció		✓	
események csoportosítása		✓	
ST analízis	✓		-
QT analízis	✓		-
PQ analízis	✓		-
PM analízis	✓		-
időtartománybeli HRV analízis	✓		-
frekvenciatartománybeli HRV analízis	✓		-
aritmia analízis	✓		-
grafikus és táblázatos adatmegjelenítés		✓	
testreszabható nézetek		✓	
testreszabható és nyomtatható jelentés		✓	
személyi és hálózatos felhasználás		✓	



Forgalmazó és szerviz:

ABPM-Art Kft • 1196 Budapest, Hunyadi u. 153.

T.: 06-1 282-5504 • mail: abpmart@mail.datanet.hu

www.abpmart.hu



Gyártó:

Meditech Kft • 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 24.

www.meditech.eu